




SUPER ULSTAR

Termalni papir za video pisač

Upute za korištenje

"SUPER ULSTAR" i drugi žigovi zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Durico C&T, Inc.
Svi ostali zaštitni znaci vlasništvo su njihovih vlasnika.

Zadnja promjena: Studenog 2020

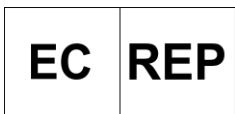

DURICO IMAGING BVBA
Villastraat 2C
1830 Machelen, Belgija



DURICO C&T, INC.
33 Oedap 6-gil, Sangju-si
Gyeongsangbuk-do 37240, Republika Koreja

Kontakt osoba

Website: www.durico.co.kr

E-mail: info@durico.co.kr

Tel: +82-2-525-8405

Fax: +82-2-525-7461

1. Opće informacije o proizvodu:

a. Naziv proizvoda: Termalni papir za video pisač

b. Naziv robne marke: SUPER ULSTAR

c. Primjenjivi modeli:

- SUPER ULSTAR-1100HG
- SUPER ULSTAR-1100HD
- SUPER ULSTAR-1100HD MIBI
- SUPER ULSTAR-1100HD Matt
- SUPER ULSTAR-1100S
- SUPER ULSTAR-1100S MIBI
- SUPER ULSTAR-2100HD
- SUPER ULSTAR-840HG
- SUPER ULSTAR-840S

d. Proizvođač: Durico C&T, Inc.

e. Adresa proizvođača

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si

Gyeongsangbuk-Do 37240 Republika Koreja

f. Namijenjeno Strurpose:

Ovaj je proizvod namijenjen upotrebi kao potrošni pribor za video pisače s termalnim tipom za ispis i pohranu video slika snimljenih ultrazvučnim dijagnostičkim uređajem. Ovaj je proizvod namijenjen za upotrebu u medicinskim okruženjima, poput klinika i bolnica. Glavni ciljani korisnici su medicinski stručnjaci, uključujući radiologe i opstetričare, koji ultrazvukom pregledavaju pacijente i / ili fetuse. Slike otisnute na ovom proizvodu služe samo za evidenciju pacijenta i za preporuku i nisu namijenjene za dijagnostičku svrhu.

g. Specifikacije proizvoda:

Grade	Size	Feature	Number of Prints
SUPER ULSTAR-1100HG	110mm×18m	High Glossy	193
SUPER ULSTAR-1100HD	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	110mm×20m	High Density Matt	215
SUPER ULSTAR-1100S	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-1100S MIBI	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-2100HD	210mm×25m	High Density	139
SUPER ULSTAR-840HG	84mm×12.5m	High Glossy	104
SUPER ULSTAR-840S	84mm×13.5m	Standard	112

h. Kompatibilnost:

Grade	Compatibility		Printer	
	Sony	Mitsubishi	Sony	Mitsubishi
SUPER ULSTAR-1100HG	UPP-110HG (Type V)	K95H/K91HG/KP91HG	UP-898 / 897 / 895 Series	P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI		K65HM/KP65HM		P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S	UPP-110S (Type I)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S MIBI		K61S/KP61S/KP61B		P95 / P93
SUPER ULSTAR-2100HD	UPP-210HD (Type II)		UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD	
SUPER ULSTAR-840HG	UPP-84HG (Type V)		UP-711MD	
SUPER ULSTAR-840S	UPP-84S (Type I)		UP-711MD	

i. Karakteristike izvedbe:

Medicinski ispis slika zahtijeva visoku preciznost dostupnu metodom termalnog ispisa. Termalni printer koristi toplinu za ispis slike na termalne papire koji su posebno presvučeni kako bi površina papira bila osjetljiva na toplinske impulse. Termalni su pisaci poželjniji od ostalih vrsta pisaca zbog njihove udobnosti, jer im nije potreban drugi dodatni potrošni materijal, poput spremnika s tintom ili tonera. Ovaj je proizvod dizajniran za savršen rad u kombinaciji s pisacima navedenima u tablici kompatibilnosti prethodne klauzule.

j. Napomena

Ovaj proizvod sam po sebi nije medicinski uređaj, već je dodatak medicinskom uređaju. Klasifikacija ovog proizvoda kao medicinskog proizvoda može se razlikovati po zemljama. Za više informacija obratite se lokalnom prodajnom predstavniku ili državnom uredu za regulaciju.

2. Upute za korištenje:

a. Pohranjivanje neispisanih papira

- 1) Neiskorišteni papir čuvajte na hladnom i tamnom mjestu (ispod 30°C/86 °F).
- 2) Ne čuvati na vrućem ili vlažnom mjestu.
- 3) Ne ostavljajte neiskorišteni papir pod izravnom sunčevom svjetlošću ili na drugim svijetlim mjestima.
- 4) Ne dopustite hlapljiva organska otapala ili vinilklorid.
- 5) Ne dodirujte površinu neiskorištenog papira prstima jer ostaci otisaka mogu oštetiti pisac.

b. Korištenje papira za ispis u termalnom pisaču

- 1) Provjerite i potvrdite da širina role papira (110mm, 210mm ili 84mm) odgovara specifikacijama vašeg pisača.
- 2) Otvorite plastičnu vrećicu da izvadite papirnatu rolu i uklonite naljepnicu pričvršćenu na kraju rollice.
- 3) Otvorite ladicu za umetanje papira u pisač i pravilno umetnite rolu papira u pisač. Pogledajte upute za uporabu pisača jer se svaki model pisača razlikuje.
- 4) Pazite da ne presavijete ili dodirnete površinu neiskorištenog papira. Obavezno izvucite i bacite prvih 15 do 20cm (6 do 8 inča) papira. Ovaj je prvi dio možda prikupio prašinu ili otiske prstiju, što može uzrokovati lošu kvalitetu ispisa, kao i oštećenje pisača.
- 5) Cizgubite ladicu za umetanje papira u pisač i uključite pisač.
- 6) Prije ispisa postavite konfiguraciju vrste papira na pisaču tako da odgovara vrsti modela proizvoda Durico. Na primjer, odaberite S za SUPER ULSTAR-1100S i SUPER ULSTAR-840S, odaberite HD za SUPER ULSTAR-1100HD i SUPER ULSTAR-2100HD ili odaberite HG za SUPER ULSTAR-1100HG i SUPER ULSTAR-840HG. Upute za konfiguriranje vrste papira razlikuju se ovisno o proizvodu i modelu pisača, stoga detaljne upute potražite u uputama za uporabu pisača.
- 7) Aprilagodite postavke kontrasta i svjetline na vašem pisaču za optimalne rezultate ispisa. Upute za konfiguriranje kontrasta i svjetline razlikuju se ovisno o proizvodu i modelu pisača, stoga detaljne upute potražite u uputama s uputama za pisač.
- 8) Većina printera zahtijeva redovito održavanje, uključujući čišćenje termičke glave i valjka. Upute za održavanje vašeg pisača potražite u uputama za održavanje vašeg pisača kako biste postigli optimalne rezultate ispisa.

c. Pohranjivanje tiskanih radova

- 1) Držite papir na tamnom, hladnom i suhom mjestu. Kad je izložena vrućini, vlazi ili sunčevoj svjetlosti, ispisana slika može izblijedjeti, pomaknuti boju ili potamniti.
- 2) Na površinu ispisanog papira nemojte nanositi sljedeće:
 - Plastične trake
 - Gumice od plastike
 - Kopirajte toner
 - Vinil
 - Markerska tinta

Plastifikator kao što su otirači za stol
Isparljiva organska otapala
Alkohol

- 3) Izbjegavajte ostavljati otiske prstiju na površini ispisanog papira.
- 4) Ne trljajte ispisanu površinu.
- 5) Ne prekrivajte tiskani papir komercijalno dostupnim laminatom. Laminiranje može uzrokovati da se ispisana slika razmaže ili potamni.
- 6) Preporuča se svaki tiskani list pohraniti licem prema gore, u polipropilensku vrećicu ili složiti komad papira između svakog lista.
- 7) Tnjegov je proizvod samo za jednokratnu upotrebu. Ne upotrebljavajte ponovno tiskane papire.

d. Zbrinjavanje proizvoda

Ovaj proizvod se ne može reciklirati. Papir pravilno odložite u skladu s lokalnim općim pravilima o odlaganju otpada nakon uporabe. Nemojte spaljivati ovaj proizvod. Trebali biste se pridržavati lokalnih propisa o odlaganju jer je ovaj proizvod presvučen kemikalijama na plastičnoj foliji. Za više informacija obratite se lokalnim vlastima u vezi zbrinjavanja izravnog termalnog filma.

3. Rok trajanja proizvoda:

a. Stanje:

- U normalnim uvjetima sobe (Ispod 30°C(86°F) / 80%RH)

b. Uvjeti jamstva:

Neotvoreni proizvod - približno 3 godine

4. Upozorenja:

- a. Ovaj proizvod namijenjen je samo termalnim pisačima.
- b. Ovaj proizvod sam po sebi nije medicinski proizvod. To je dodatak namijenjen uporabi s medicinskim uređajem.
- c. Ovaj proizvod je samo za jednokratnu upotrebu. Nemojte ponovno koristiti nijedan dio ovog proizvoda nakon ispisa.
- d. Ne koristite ovaj proizvod ako je plastična vrećica poderana ili ako je neiskorišteni papir pocrnio.
- e. Bilo koji incident koji se dogodio u vezi s uporabom proizvoda treba prijaviti proizvođaču i odgovarajućim lokalnim vlastima.
- f. Kada ti umetnete rolu papira u pisač, izvucite i bacite prvih 15 do 20_{cm} (6

do 8 inča) papira. Ovaj je prvi dio možda prikupio prašinu ili otiske prstiju, što može uzrokovati lošu kvalitetu ispisa, kao i oštećenje pisača.

- g. Uvijek pažljivo rukujte rolom papira kada je stavljate / vadite u / iz pisača kako biste izbjegli izlaganje papira prašini, prljavštini, otiscima prstiju itd.