




SUPER ULSTAR

Karta Termali għal Video Printer

Istruzzjonijiet għall-użu

"SUPER ULSTAR" u marki oħra huma trademarks jew trademarks irregistrati ta 'Durico C&T, Inc.
It-trademarks l-oħra kollha huma proprjetà tas-sidien rispettivi tagħhom.

L-aħħar modifikat: Novembru 2020

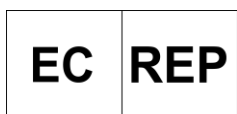

DURICO IMAGING BVBA
Villastraat 2C
1830 Machelen, Belgium



DURICO C&T, INC.
33 Oedap 6-gil, Sangju-si
Gyeongsangbuk-do 37240, Republic of Korea

Contact point

Website: www.durico.co.kr

E-mail: info@durico.co.kr

Tel: +82-2-525-8405

Fax: +82-2-525-7461

1. Informazzjoni Ġenerali dwar il-Prodott:

a. Isem tal-Prodott: Karta Termali għal Video Printer

b. Isem tad-Ditta / tal-Manifattur: SUPER ULSTAR

c. Mudelli Applikabbli:

- SUPER ULSTAR-1100HG
- SUPER ULSTAR-1100HD
- SUPER ULSTAR-1100HD MIBI
- SUPER ULSTAR-1100HD Matt
- SUPER ULSTAR-1100S
- SUPER ULSTAR-1100S MIBI
- SUPER ULSTAR-2100HD
- SUPER ULSTAR-840HG
- SUPER ULSTAR-840S

d. Manifattur: Durico C&T, Inc.

e. Indirizz tal-manifattur

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si

Gyeongsangbuk-Do 37240 Ir-Repubblika tal-Korea

f. Maħsub Pgħan:

Dan il-prodott huwa maħsub biex jintuża bħala aċċessorju konsumabbli għall-Istampaturi tal-Vidjow tat-Tip Termali għall-istampar u l-ħażna ta 'immaġni tal-vidjo maqbuda minn apparat dijanjostiku tal-ultrasound. Dan il-prodott huwa maħsub għall-użu f'ambjenti mediċi, bħal kliniċi u sptarijiet. L-utenti ewlenin fil-mira huma professjonisti mediċi, inklużi radjoloġisti u ostetricisti, li jeżaminaw pazjenti u / jew feti permezz ta 'ultrasonografija. L-istampi stampati fuq dan il-prodott huma għar-rekord tal-pazjent u l-użu tar-riferiment biss u mhumiex maħsuba biex jintużaw għal skop dijanjostiku.

g. Speċifikazzjonijiet tal-Prodott:

Grade	Size	Feature	Number of Prints
SUPER ULSTAR-1100HG	110mm×18m	High Glossy	193
SUPER ULSTAR-1100HD	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI	110mm×20m	High Density	215
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	110mm×20m	High Density Matt	215
SUPER ULSTAR-1100S	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-1100S MIBI	110mm×20m	Standard	215
SUPER ULSTAR-2100HD	210mm×25m	High Density	139
SUPER ULSTAR-840HG	84mm×12.5m	High Glossy	104
SUPER ULSTAR-840S	84mm×13.5m	Standard	112

h. Kompatibilità:

Grade	Compatibility		Printer	
	Sony	Mitsubishi	Sony	Mitsubishi
SUPER ULSTAR-1100HG	UPP-110HG (Type V)	K95H/K91HG/KP91HG	UP-898 / 897 / 895 Series	P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100HD MIBI		K65HM/KP65HM		P95 / P93
SUPER ULSTAR-1100HD Matt	UPP-110HD (Type II)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S	UPP-110S (Type I)		UP-898 / 897 / 895 Series	
SUPER ULSTAR-1100S MIBI		K61S/KP61S/KP61B		P95 / P93
SUPER ULSTAR-2100HD	UPP-210HD (Type II)		UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD	
SUPER ULSTAR-840HG	UPP-84HG (Type V)		UP-711MD	
SUPER ULSTAR-840S	UPP-84S (Type I)		UP-711MD	

i. Karatteristiċi tal-Prestazzjoni:

L-Istampar tal-Immaġni Medika jeħtieġ preċiżjoni għolja disponibbli mill-metodu tal-istampar termali. L-istampatur termali juża s-sħana biex jistampa stampa fuq karti Termali, li huma miksija apposta biex jagħmlu l-wiċċ tal-karta sensittiv għall-impulsi termali. L-istampaturi termali huma preferuti fuq tipi oħra ta 'printers għall-konvenjenza tagħhom billi ma jeħtiġux konsumabbli addizzjonali oħra bħal cartridges tal-linka jew linka. Dan il-prodott ġie ddisinjat biex jaħdem perfettament flimkien mal-istampaturi speċifikati fit-Tabella tal-Kompatibilità tal-klawsola preċedenti.

j. Nota

Dan il-prodott mhuwiex apparat mediku fih innifsu, iżda huwa aċċessorju għal apparat mediku. Il-klassifikazzjoni ta 'dan il-prodott bħala apparat mediku tista' tvarja skond il-pajjiż. Ikkonsulta r-rappreżentant tal-bejgħ lokali tiegħek jew l-uffiċċju regolatorju tal-gvern għal aktar informazzjoni.

2. Istruzzjonijiet għall-Użu:

a. Kif taħžen Karta Mhux Stampata

- 1) Aħžen karta mhux użata f'post frisk u mudlam (taħt 30°C/ 86°F).
- 2) Taħżinx f'post sħun jew umdu.
- 3) Tħallix karta mhux użata taħt dawl tax-xemx dirett jew f'postijiet oħra li jleqqu.
- 4) Tħallix solvent organiku volatili jew klorur tal-vinil.
- 5) Tmissx il-wiċċ ta 'karta mhux użata bis-swaba' għax residwu mill-marki tas-swaba 'jista' jikkawża ħsara lill-istampatur.

b. BI-użu tal-Karta għall-istampar fi Printer Termali

- 1) Iċċekkja u kkonferma li l-wisa 'tar-romblu tal-karta (110mm, 210mm, jew 84 mm) taqbel mal-ispeċifikazzjonijiet tal-istampatur tiegħek.
- 2) Qatta 'l-borża tal-plastik miftuħa biex toħroġ ir-roll tal-karta, u neħhi l-istiker imwaħħla mat-tarf tar-roll.
- 3) Iftaħ il-kontenitur għat-tagħbija tal-karta tal-istampatur u għabbi r-romblu tal-karta sewwa fl-istampatur. Jekk jogħġbok irreferi għall-istruzzjonijiet tal-manwal tal-istampatur tiegħek billi kull mudell tal-istampatur huwa differenti.
- 4) Oqgħod attent li ma tingħalaqx jew tmissx il-wiċċ ta 'karta mhux użata. Kun żgur li tiġbed u armi l-ewwel 15 sa 20cm (6 sa 8 pulzjeri) tal-karta. Din l-ewwel porzjon jista 'jkun ġabret xi trab jew marki tas-swaba', li jistgħu jikkawżaw kwalità fqira tal-istampar kif ukoll ħsara lill-istampatur.
- 5) Ċitlef il-kontenitur tat-tagħbija tal-karta tal-istampatur u ixgħel l-istampatur.
- 6) Qabel l-istampar, issettja l-konfigurazzjoni tat-tip tal-karta fuq l-istampatur biex taqbel mat-tip tal-mudell tal-prodott Durico. Pereżempju, agħżel S għal SUPER ULSTAR-1100S u SUPER ULSTAR-840S, agħżel HD għal SUPER ULSTAR-1100HD u SUPER ULSTAR-2100HD, jew agħżel HG għal SUPER ULSTAR-1100HG u SUPER ULSTAR-840HG. L-istruzzjonijiet għall-konfigurazzjoni tat-tip tal-karta jvarjaw skont il-marka u l-mudell tal-istampatur, għalhekk jekk jogħġbok irreferi għall-manwal tal-istruzzjonijiet tal-istampatur tiegħek għal direzzjonijiet dettaljati.
- 7) Aaġġusta l-issettjar tal-Kuntrast u l-Luminożità fuq l-istampatur tiegħek għal riżultati tal-istampar ottimali. L-istruzzjonijiet għall-konfigurazzjoni tal-kuntrast u l-luminożità jvarjaw skont il-marka u l-mudell tal-istampatur, għalhekk jekk jogħġbok irreferi għall-manwal tal-istruzzjonijiet tal-istampatur tiegħek għal direzzjonijiet dettaljati.
- 8) Ғafna printers jeħtieġu manutenzjoni regolari, inkluż it-tindif tar-ras termika u tar-romblu. Jekk jogħġbok irreferi għall-manwal tal-istruzzjoni tal-istampatur tiegħek dwar struzzjonijiet dwar il-manutenzjoni tal-istampatur tiegħek għal riżultati tal-istampar ottimali.

c. Ғażna ta 'Karti Stampati

- 1) Żomm il-karta f'post mudlam, frisk u niexef. Meta tkun esposta għas-sħana, umdità, jew dawl tax-xemx, l-immagni stampata tista 'tgħib, tibdel il-kulur, jew tiskura.
- 2) Tapplikax dan li ġej għall-wiċċ tal-karta stampata:

Tapes tal-plastik

Gomom tal-plastik
Ikkopja l-linka
Vinil
Marker linka
Plastiċizzant b'hal desk mats
Solventi organiċi volatili
Alkoħol

- 3) Evita li tħalli marki tas-swaba 'fuq il-wiċċ tal-karta stampata.
- 4) Togħroxx il-wiċċ stampat.
- 5) Tkoprix il-karta stampata b'laminat disponibbli kummerċjalment. Il-laminazzjoni tista 'tikkawża li l-immaġni stampata ttebba' jew tiskura.
- 6) Huwa rrakkomandat li tinħażen kull folja stampata wiċċha 'l fuq, f'borża tal-polipropilene, jew li timtela b'biċċa karta bejn kull folja.
- 7) Til-prodott tiegħu huwa għal użu ta 'darba biss. Tużax karti stampati mill-ġdid.

d. Rimi tal-prodott

Dan il-prodott mhux riċiklabbli. Armi l-karta kif suppost skont ir-regoli ġenerali lokali dwar ir-rimi tal-iskart wara l-użu. Ma taħraqx dan il-prodott. Għandek tosserva r-regolamenti lokali tiegħek dwar ir-rimi billi dan il-prodott huwa miksi b'sustanzi kimiċi fuq film tal-plastik. Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lill-awtorità lokali tiegħek dwar ir-rimi ta 'film termali dirett.

3. Żmien kemm idum tajjeb il-prodott:

a. Kundizzjoni:

- Taħt Kundizzjoni Normali tal-Kamra (Taħt 30°C(86°F) / 80%RH)

b. Termini ta 'garanzija:

Prodott mhux miftuħ - Approx. 3 snin

4. Attenzjonijiet:

- a. Dan il-prodott huwa għall-użu fi printers termali biss.
- b. Dan il-prodott mhuwiex fih innifsu apparat mediku. Huwa aċċessorju maħsub biex jintuża ma 'apparat mediku.
- c. Dan il-prodott huwa għal użu ta 'darba biss. Tużax mill-ġdid xi parti minn dan il-prodott wara li tkun stampajt.
- d. Tużax dan il-Prodott jekk il-borża tal-plastik tkun imqatta ', jew jekk xi karta mhux użata tkun iswed.

- e. Kwalunkwe incident li seħħ fir-rigward tal-użu tal-prodott għandu jiġi rrapportat lill-manifattur u lill-awtoritajiet lokali xierqa.
- f. Meta int tagħbija r-romblu tal-karta fl-istampatur, kun żgur li tiġbed u armi l-ewwel 15 sa 20_{cm} (6 sa 8 pulzieri) tal-karta. Din l-ewwel porzjon jista 'jkun ġabret xi trab jew marki tas-swaba', li jistgħu jikkawżaw kwalità fqira tal-istampar kif ukoll ħsara lill-istampatur.
- g. Dejjem immaniġġja r-roll tal-karta bir-reqqa meta tgħabbiha / tinhatt ġo / mill-istampatur biex tevita li tesponi l-karta għat-trab, ħmieġ, marki tas-swaba, eċċ.